
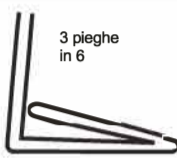





GRAF1 REV3 del 15/06/2011  Gruppo Farmaimpresa Reparto Grafico	NOME PRODOTTO	CLIENTE	COD FORMULA	COD INTERNO	REVISIONE
	Revaginal	Farmalimpresa	TIPOGRAFIA	FT.CE.15.11F	03
DATA CREAZIONE 23/11/16	GRAFICO MRG	RIF.CON.PRIMARIO/SECONDARIO:			
COLORE: Pantone Purple C	CARATTERISTICHE TECNICHE	<input type="checkbox"/> Teste approvate	- inserita grafica da FT		
DIMENSIONI APERTO: 130x180 mm		<input type="checkbox"/> Grafica approvata			
DIMENSIONI PIEGATO: 130x30 mm		<input type="checkbox"/> Colori approvati			
CARTA: 80 g		<input type="checkbox"/> Dimensioni approvate			
QUANTITA':		<input type="checkbox"/> Dimensioni fogl. piegato			
SCHEMA PIEGA:		<input type="checkbox"/> Macchinabilità / piega			
		<input type="checkbox"/> Compatibilità cond.prim/sec			
	<input type="checkbox"/> Carta				

Revaginal

ovuli - ovules



Revaginal ovuli. Dispositivo medico a base di acido ialuronico sale sodico, polycarbophil, acido lattico, vitamina E, vitamina A, acido 18-beta-glicirretico, tea tree oil, fosfatidilcolina, trigliceridi semisintetici.

Descrizione:
Revaginal ovuli è un dispositivo medico che aiuta a mantenere intatte le difese naturali della vagina ed agevola il ripristino della flora vaginale; a base di acido ialuronico ed acido lattico aiuta ad eliminare i sintomi conseguenti ad uno squilibrio della idratazione e/o del pH vaginale.
L'acido ialuronico, presente come sale sodico, ad un dosaggio di 10 mg/ovulo, svolge azione idratante e lubrificante contro la secchezza vaginale facilitando il ripristino di un naturale e gradevole ambiente vaginale.
L'acido lattico, componente normalmente presente in vagina, favorisce un'immediata correzione del pH e facilita il naturale ripristino del delicato ecosistema vulvo-vaginale.
Il polycarbophil, una volta legato al muco vaginale, è in grado di rilasciare in modo costante ioni H+ che contribuiscono ad abbassare il pH dell'ambiente vaginale.

Indicazioni:
Gli ovuli Revaginal sono utili nella prevenzione e nel trattamento della secchezza vaginale a carattere aspecifico nonché in caso di vaginiti atrofiche. Coadiuvante in caso di irritazioni, bruciori e pruriti vaginali nonché nelle affezioni vaginali a carattere flogistico ed infettivo. Indicato nelle donne in età fertile, in menopausa nonché nelle perimenopausa. Il prodotto è compatibile con i profilattici.

Posologia:
Introdurre in vagina 1 ovulo al dì, preferibilmente di sera prima di coricarsi, per 5-7 giorni successivi alla fine del ciclo mestruale o secondo altra indicazione medica.

Modalità d'uso:
1) Lavare le parti intime accuratamente (preferibilmente sia con una lavanda vaginale esterna che con una interna);
2) Aprire la confezione e, dopo essersi ben lavate le mani, prelevare dal blister un singolo ovulo;
3) Inserire l'ovulo delicatamente in vagina cercando di arrivare in profondità, preferibilmente in posizione supina, evitando fuoriuscite accidentali.

Conservazione:
Conservare la confezione ben chiusa in luogo asciutto, tra i 5°C ed i 25°C, a riparo dalla luce e da fonti di calore.


Effetti collaterali:
Ipersensibilità accertata verso i componenti.

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni o ferite vaginali. Non utilizzare in presenza di mestruazioni. Non superare la dose consigliata senza il parere del medico. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifica, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

Precauzioni d'uso:
Nelle donne in gravidanza ed in allattamento e nei bambini l'uso degli ovuli deve essere limitato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In caso di imene intatto, prima dell'utilizzo consultare il proprio ginecologo sulle specifiche modalità d'uso. Dispositivo monouso: non riutilizzare in caso di fuoriuscite accidentali.

Presentazione:
Confezione da 2 blister contenente 5 ovuli ciascuno (10 ovuli vaginali/confezione) da 2 g/ovulo.

Fabbricante
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1
25124 Brescia




Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

FT.CE.15.11.F03 Rev. 23/11/2016

Revaginal

ovuli - ovules



Revaginal ovules. Medical device based on hyaluronic acid sodic salt, polycarbophil, lactic acid, Vitamin E, Vitamin A, 18-beta-glycyrrhetic acid, tea tree oil, phosphatidylcholine, semi-synthetic triglycerides.

Description:
Revaginal ovules is a medical device that helps maintain the natural defenses of the vagina and facilitates the restoration of vaginal flora; containing hyaluronic acid and lactic acid it helps delete the symptoms due to unbalanced vaginal hydration and/or vaginal pH. Hyaluronic Acid in its sodium salt form at a 10mg/ovule dosage exerts an hydrating and lubricating action against vaginal dryness contributes to restore a natural and comfortable vaginal environment.
Lactic Acid normally present in the vagina favors an immediate pH correction and facilitates the natural recovery of the delicate vulvo-vaginal ecosystem.
Polycarbophil interacting with vaginal mucus can constantly release H+ ions contributing to lower the pH of vaginal environment.

Indications:
Revaginal ovules are useful in the prevention and treatment of vaginal dryness to a specific character and in the case of atrophic vaginitis. Coadjuvant in case of irritation, burning and itching in the vaginal and vaginal disorders in infectious and inflammatory nature. Indicated in women of childbearing age, menopause as well as in perimenopause. The product is compatible with condoms.

Dosage:
Insert 1 ovule/day into the vagina - preferably in the evening before sleeping - for 5-7 days after the end of menstrual cycle or according to medical advice.

Instruction for Use:
1) Wash the vaginal area properly before application (preferably with both a vaginal wash external and internal);
2) Wash hands carefully before opening the blister extract one single ovule;
3) Gently insert the ovule deeply into the vagina, preferably in a supine position, avoiding accidental exit of the ovule out of the vagina.

Storage Conditions:
Store the package properly closed in a dry place, between 5°C and 25°C, away from light and heat sources.


Side effects:
Known hypersensitivity to any of the ingredients.

Warnings:
Keep out of reach and sight of children. Do not swallow. Do not use if package has been previously opened or damaged. Do not use the product after the expiry date. The expiry date refers to the unopened and properly stored product. Do not use the product in case of vaginal lesions and wounds. Do not use the product during menstruation. Do not exceed the suggested dosage without medical advice. The use - especially if prolonged - can lead to sensitiveness events. If this is the case, stop the treatment and consult the doctor in order to start a proper therapy. It is important to inform the doctor or the pharmacist of any undesired effects non reported in the insert leaflet.

Precautions on use:
During pregnancy, lactation and for children the use of ovules must be limited only if strictly required and under direct control of your doctor. In case of the intact hymen, before using consult your gynecologist to the specific conditions of use. Monouse device. In case of accidental exit of the ovule out of the vagina, do not re-use the ovule.

Presentation:
Folding box with two blisters containing 5 vaginal ovules each (10 ovules/pack) 2g/ovule.

Manufacturer:
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1
25124 Brescia



The medical device must not be disposed in the wastewaters or household waste. Ask your pharmacist how to dispose the medical devices no longer required. This will help protect the environment.

FT.CE.15.11.F03 Rev. 23/11/2016