

Con Acido Borico
e Acido Lattico
With Boric Acid
and Lactic Acid

Schiuma / Foam
Revaginal

Revaginal
Schiuma
Foam



Con Acido Borico
e Acido Lattico
With Boric Acid
and Lactic Acid

PJ
PHARMA 150ml

Revaginal Schiuma è una soluzione detergente pronta per l'uso. Utile per l'igiene e la protezione intima di routine, nonché eccellente sostituto di detergenti intimi quando non è possibile ricorrere alle consuete pratiche igieniche. Formulato per l'igiene quotidiana vulvo-perineale, aiuta a ripristinare il pH fisiologico delle zone intime. È un dispositivo medico particolarmente indicato come coadiuvante nel trattamento e nella prevenzione di piccoli fastidi intimi come prurito, arrossamenti, lievi bruciori, fenomeni di ipersensibilità ed in caso di affezioni vaginali anche a carattere micotico. **Revaginal Schiuma** è a base di Acido Lattico, componente normalmente presente in vagina, e Acido Borico. Questi componenti favoriscono un'immediata correzione del pH, facilitando il naturale ripristino del delicato sistema vulvo-perianale e contribuendo a renderlo sfavorevole a proliferazioni batteriche e/o funginee.

Modalità d'uso: si consiglia l'utilizzo della schiuma una volta al giorno. Prima dell'applicazione, lavarsi le mani e agitare il flacone. Utilizzando l'apposito erogatore, versare una dose nel palmo della mano distribuendo delicatamente la schiuma dai genitali esterni all'area perianale. Lasciare agire qualche istante quindi eliminare i residui con salvietta pulita o risciacquare.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima dell'utilizzo.

Attenzione: per avvertenze ed effetti collaterali, leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Composizione: Tegobetaina, Acido Borico, Lattato di sodio, Sodio PCA, Glicina, Fruttosio, Urea, Niacinamide, Inositolo, Benzoato di sodio, Acido lattico, Polisorbato, Acqua, Profumo, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, EDTA bisodico, Potassio Sorbato, Proteine del grano, Glicerolo, Clorexidina Digluconato, Acido Glicolico.



FT.CE.142.A01

Revaginal
Schiuma
Foam



Con Acido Borico
e Acido Lattico
With Boric Acid
and Lactic Acid

PJ
PHARMA 150ml

Revaginal Foam is a ready-to-use cleaning solution. Useful for routine hygiene and intimate protection, as well as an excellent substitute for intimate cleansers when it is not possible to resort to the usual hygiene practices. Formulated for vulvo-perineal daily hygiene, it helps restore the physiological pH of the intimate areas. It is a medical device particularly indicated as an adjunct in the treatment and prevention of small intimate discomforts such as itching, redness, light burns, hypersensitivity phenomena and in case of vaginal ailments even of a mycotic nature. **Revaginal Foam** is based on lactic acid, a component normally present in the vagina, and boric acid. These components favor an immediate pH correction, facilitating the natural restoration of the delicate vulvo-perianal system and helping to make it unfavorable to bacterial and / or fungal proliferation.

How to use: it is recommended to use the foam once a day. Before application, wash your hands and shake the bottle. Using the dispenser, pour a dose into the palm of your hand by gently distributing the foam from the external genitals to the perianal area. Leave to act for a few moments then remove residues with a clean towel or rinse.

Warnings: Keep out of reach of children. Read the package leaflet carefully before use.

Attention: for warnings and side effects, read the package leaflet carefully

Composition: Tegobetaine, Boric Acid, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Polysorbate, Water, Perfume, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, Potassium Sorbate, wheat protein, Chlorhexidine Digluconate, Glycolic Acid.

Fabbricante / Manufacturer:
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1- 25124 Brescia (Italy)

BARCODE

LOT



Revaginal Schiuma



Con Acido Borico e Acido Lattico.

Revaginal Schiuma è una soluzione detergente pronta per l'uso. Utile per l'igiene e la protezione intima di routine, nonché eccellente sostituto di detergenti intimi quando non è possibile ricorrere alle consuete pratiche igieniche. Formulato per l'igiene quotidiana vulvo-perineale, aiuta a ripristinare il pH fisiologico delle zone intime. È un dispositivo medico particolarmente indicato come coadiuvante nel trattamento e nella prevenzione di piccoli fastidi intimi come prurito, arrossamenti, lievi bruciori, fenomeni di ipersensibilità ed in caso di affezioni vaginali anche a carattere micotico.

Revaginal Schiuma è a base di Acido Lattico, componente normalmente presente in vagina, e Acido Borico. Questi componenti favoriscono un'immediata correzione del pH, facilitando il naturale ripristino del delicato sistema vulvo-perianale e contribuendo a renderlo sfavorevole a proliferazioni batteriche e/o funginee.

Modalità d'uso: si consiglia l'utilizzo della schiuma una volta al giorno. Prima dell'applicazione, lavarsi le mani e agitare il flacone. Utilizzando l'apposito erogatore, versare una dose nel palmo della mano distribuendo delicatamente la schiuma dai genitali esterni all'area perianale. Lasciare agire qualche istante quindi eliminare i residui con salvietta pulita o risciacquare.


Composizione: Tegobetaina, Acido Borico, Lattato di sodio, Sodio PCA, Glicina, Fruttosio, Urea, Niacinamide, Inositolo, Benzoato di sodio, Acido lattico, Polisorbato, Acqua, Profumo, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, EDTA bisodico, Potassio Sorbato, Proteine del grano, Glicerolo, Clorexidina Digluconato, Acido Glicolico.


Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare il prodotto correttamente sigillato e a riparo dalla luce e da fonti di calore. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza è valida per il prodotto correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o aperta. Il dispositivo non è sterile. Non utilizzare in caso di lesioni dell'organo. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Per le donne in gravidanza e in allattamento l'uso del prodotto deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale accertata verso i componenti presenti. La non corretta osservanza delle avvertenze, delle modalità d'uso, nonché l'utilizzo di uno stesso flacone da parte di più persone, potrebbe pregiudicare l'efficacia del prodotto o essere causa dell'aggravarsi di problemi esistenti o causare il manifestarsi di problematiche prima non presenti. Non utilizzare il prodotto su bambini al di sotto dei 3 anni di età. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

Effetti collaterali: Nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni di utilizzo non sono noti, al momento, effetti indesiderati specificatamente legati all'uso del prodotto. La sua compatibilità è stata verificata, ma in caso di fenomeni irritativi o allergici, sospendere l'utilizzo e rivolgersi al proprio medico/ginecologo.

Confezione: Flacone da 150 mL.

 **Fabbricante:**
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1- 25124 Brescia (IT)

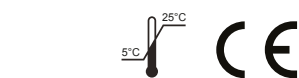

 Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

FTCE.142.F01 Rev. 061 19-05-2022

Revaginal Foam



With Boric Acid and Lactic Acid.

Revaginal Foam is a ready-to-use cleaning solution. Useful for routine hygiene and intimate protection, as well as an excellent substitute for intimate cleansers when it is not possible to resort to the usual hygiene practices. Formulated for vulvo-perineal daily hygiene, it helps restore the physiological pH of the intimate areas. It is a medical device particularly indicated as an adjunct in the treatment and prevention of small intimate discomforts such as itching, redness, light burns, hypersensitivity phenomena and in case of vaginal ailments even of a mycotic nature.

Revaginal Foam is based on lactic acid, a component normally present in the vagina, and boric acid. These components favor an immediate pH correction, facilitating the natural restoration of the delicate vulvo-perianal system and helping to make it unfavorable to bacterial and / or fungal proliferation.


How to use: it is recommended to use the foam once a day. Before application, wash your hands and shake the bottle. Using the dispenser, pour a dose into the palm of your hand by gently distributing the foam from the external genitals to the perianal area. Leave to act for a few moments then remove residues with a clean towel or rinse.


Composition: Tegobetaine, Boric Acid, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Polysorbate, Water, Perfume, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, Potassium Sorbate, wheat protein, Chlorhexidine Digluconate, Glycolic Acid.


Warnings: Keep out of reach of children. Keep the product properly sealed and protected from light and heat sources. Do not use the product after the expiry date shown on the package. The expiry date is valid for the product properly stored. Do not use the product if the package is damaged or opened. The device is not sterile. Do not use in case of organ injuries. Do not swallow. Avoid contact with eyes. For pregnant and lactating women, the use of the product must be limited to cases of actual need and under the direct supervision of the doctor. Do not use in case of individual hypersensitivity to the components present. The incorrect observance of the warnings, the instructions for use, as well as the use of the same bottle by several people, could compromise the effectiveness of the product or cause existing problems to worsen or cause problems to arise before not present. Do not use the product on children under 3 years of age. It is important to report the appearance of undesirable effects not described in this package leaflet to the doctor or pharmacist.

Side effects: In normal and reasonably foreseeable conditions of use, no undesirable effects specifically related to the use of the product are currently known. Its compatibility has been verified, but in the event of irritative or allergic phenomena, stop the use and contact your doctor / gynecologist.

Packaging: 150 mL bottle

 **Manufacturer:**
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1- 25124 Brescia (IT)

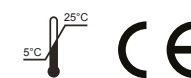

 The Medical Device must not be disposed in the waste water or household waste. Ask your pharmacist how to dispose Medical Devices no longer required. This will help protect the environment.