

Rinofast
Spray nasale
Nasal spray
20 ml

FT/CE/12/A08L21P
Rev. del 24/05/2016

RINOFAST FLU - 20ml
Spray Nasale / Nasal Spray



Gruppo FarmImpresa srl
Via Cipro, 1
25124 Brescia Italy

Isotonic saline solution at controlled pH with N-Acetyl Cysteine and Methyl-Sulfonil Methane (MSM) indicated for daily nasal hygiene. Against the irritation caused by external agents resulting from environmental pollution. Helps to keep free the nose, reduces the dryness moisturizing surface gently. Helps regulate nasal secretions after rhinorrhea and prevent the formation and construction of bacterial biofilm.

Attention: Keep away from the reach of the children. For storage, warnings, dosage and instructions for use read carefully the leaflet.

Astuccio / Box:	PAP21	Carta / Paper
Foglietto / Leaflet:	PAP22	Carta / Paper
Etichetta / Label:	PP5	Plastica / Plastic
Fiacone / Bottle:	CGL95	Vetro / Glass
Erogatore / Dispenser:	OTHER07	Plastica / Plastic
Tappo / Cap:	HDPE2	Plastica / Plastic



Verifica con il tuo Comune le modalità di gestione della raccolta differenziata. Check with your City how to manage separate waste collection.

Rinofast
Spray nasale - Nasal spray

Soluzione salina isotonica a pH controllato con N-Acetil Cisteina e Metil-Sulfonil Metano (MSM), indicata per l'igiene nasale quotidiana. Contro gli stati di irritazione causati da agenti esterni derivanti da inquinamento ambientale. Aiuta a mantenere libero il naso, riduce la secchezza idratandone delicatamente la superficie. Aiuta a regolarizzare le secrezioni nasali in seguito a rinorrea ed a prevenire la formazione e l'edificazione del biofilm batterico.

Attenzione: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per conservazione, avvertenze, dosaggio e modalità d'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo.

20 ml



Soluzione salina isotonica
Isotonic saline solution
N-Acetil Cisteina e/and
Metil-Sulfonil Metano (MSM)




21P

LOT

2023/11

RINOFAST FLU - 20ml
Spray Nasale / Nasal Spray

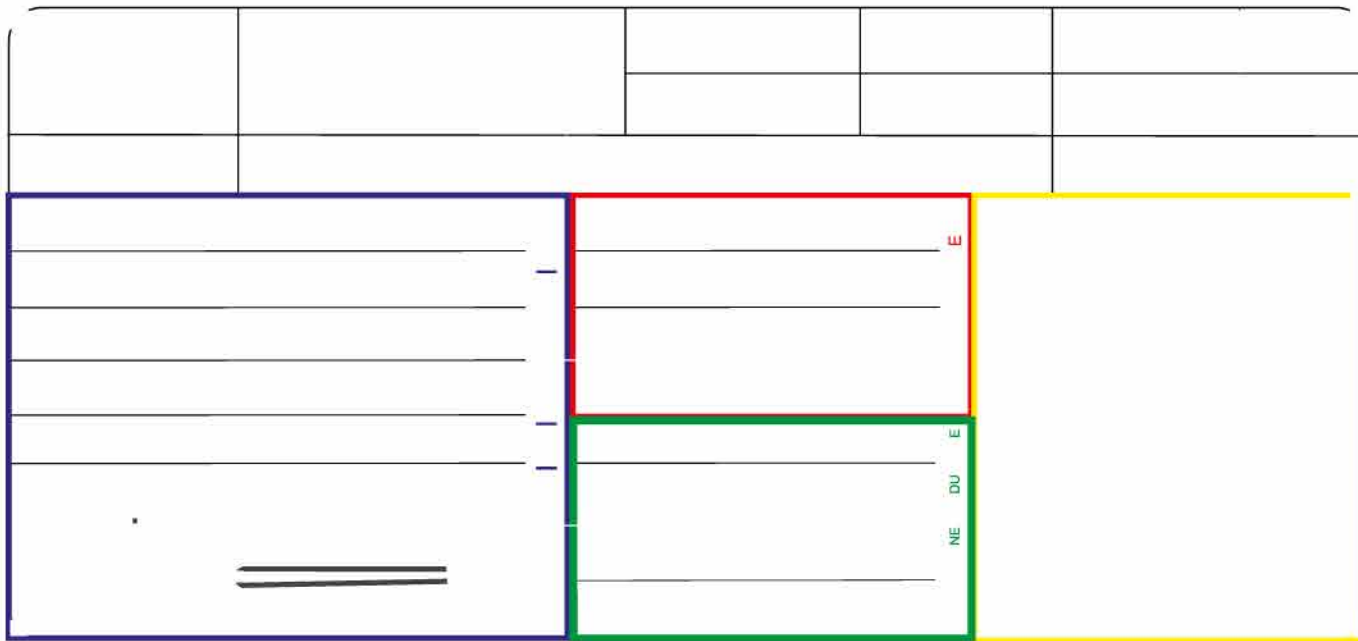

Rinofast *flu*

Spray nasale 20ml



Soluzione salina isotonica a pH controllato con N-Acetil Cisteina e Metil-Sulfonil Metano (MSM), indicata per l'igiene nasale quotidiana. Contro gli stati di irritazione causati da agenti esterni derivanti da inquinamento ambientale. Aiuta a mantenere libero il naso, riduce la secchezza idratandone delicatamente la superficie. Aiuta a regolarizzare le secrezioni nasali in seguito a rinite ed a prevenire la formazione e l'edificazione del biofilm batterico.

INGREDIENTI:

Aqua, Sodium Chloride, N-AcetylCysteine, Metil Sulfonil Metano (MSM), Sodium Bicarbonate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ethylenediaminetetraacetic acid Disodium salt, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Aroma.

DOSAGGIO:

2-3 Spruzzi per narice, 3-4 volte al giorno, o più spesso al bisogno.

MODO D'USO:

1. Togliere il cappuccio di protezione dall'erogatore.
2. Tenere il flacone e il capo in senso verticale, posizionare delicatamente il beccuccio all'imbocco della narice.
3. Premere con due dita sulla base dell'erogatore.
4. Ripetere l'operazione con l'altra narice.
5. Pulire l'erogatore.
6. Rimettere il cappuccio di protezione dell'erogatore.

AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In alcuni casi la nebulizzazione può causare un lieve e transitorio senso di irritazione locale. Evitare di spruzzare negli occhi. L'uso dello stesso flacone, da parte di più soggetti, può facilitare la trasmissione di infezioni. Non utilizzare in caso di epistassi in corso o appena conclusa. Vietato l'uso da parte di bambini al di sotto dei tre anni d'età.

CONSERVAZIONE:

Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e da fonti di calore. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza o se la confezione non si presenta integra. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

EFFETTI COLLATERALI:

Ipersensibilità verso i componenti. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione; dove ciò si verifici, interrompere il trattamento e consultare un medico al fine di istituire idonea terapia. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

PRESENTAZIONE:

Soluzione in flacone di vetro da 20 ml con erogatore spray verticale.

Fabbricante:
Gruppo Farmalimpresa srl
Via Cipro, 1
25124 Brescia Italy



Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

FT/CE/12/F04 Rev. del 18/11/2015

Rinofast *flu*

Nasal spray 20ml



Isotonic saline solution at controlled pH with N-Acetyl Cysteine and Methyl-Sulfonil Methane (MSM) indicated for daily nasal hygiene. Against the irritation caused by external agents resulting from environmental pollution. Helps to keep free the nose, reduces the dryness moisturizing surface gently. Helps regulate nasal secretions after rhinorrhea and prevent the formation and construction of bacterial biofilm.

INGREDIENTS:

Aqua, Sodium chloride, N-Acetyl Cysteine, Methyl-Sulfonil Methane (MSM), Sodium Bicarbonate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ethylenediaminetetraacetic acid Disodium salt, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Aroma.

DOSAGE:

2-3 spray in each nostril, 3-4 times a day, or more often as needed.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Remove the protective cap from the dispenser.
2. Hold the bottle and the head vertically, gently place the nozzle of the dispenser at the entrance of the nostril.
3. Press with two fingers on the basis of the dispenser.
4. Repeat with the other nostril.
5. Clean the dispenser.
6. Replace the protective cap dispenser.

WARNINGS:

Keep away from the reach of the children. In some cases the nebulization can cause a mild and transient sense of local irritation. Avoid spraying in eyes. The use of the same bottle, by multiple subjects, can facilitate the transmission of infections. Do not use in case of epistaxis in progress or just completed. Prohibited use by children under 3 years of age.

STORAGE:

Store the product at room temperature away from light and heat sources. Do not use the product after the expiration date or if the packaging appear sun damaged. The expiry date refers to the product properly packaged and correctly stored.

SIDE EFFECTS:

Possible hypersensitivity to any of the components. The use of the product, especially if prolonged, may induce sensitivity phenomena. In this case stop the treatment and consult your doctor for a proper therapy. It is important to inform your doctor or pharmacist of any other undesired effects not reported in this insert leaflet.

PRESENTATION:

Solution in 20 ml glass bottle with spray dispenser.

Manufacturer:
Gruppo Farmalimpresa srl
Via Cipro, 1
25124 Brescia Italy



The medical device must not be disposed in the wastewaters or household waste. Ask your pharmacist how to dispose the medical devices no longer required. This will help protect the environment.

FT/CE/12/F04 Last Rev. del 18/11/2015