


Product: **RINOFAST KIT**  
 Internal code: **FT.K.02**  
 Country:  
 Company: **PJ PHARMA**  
 Operator:

Folded size:  
 Paper:  
 Colors:  
 Finishing:

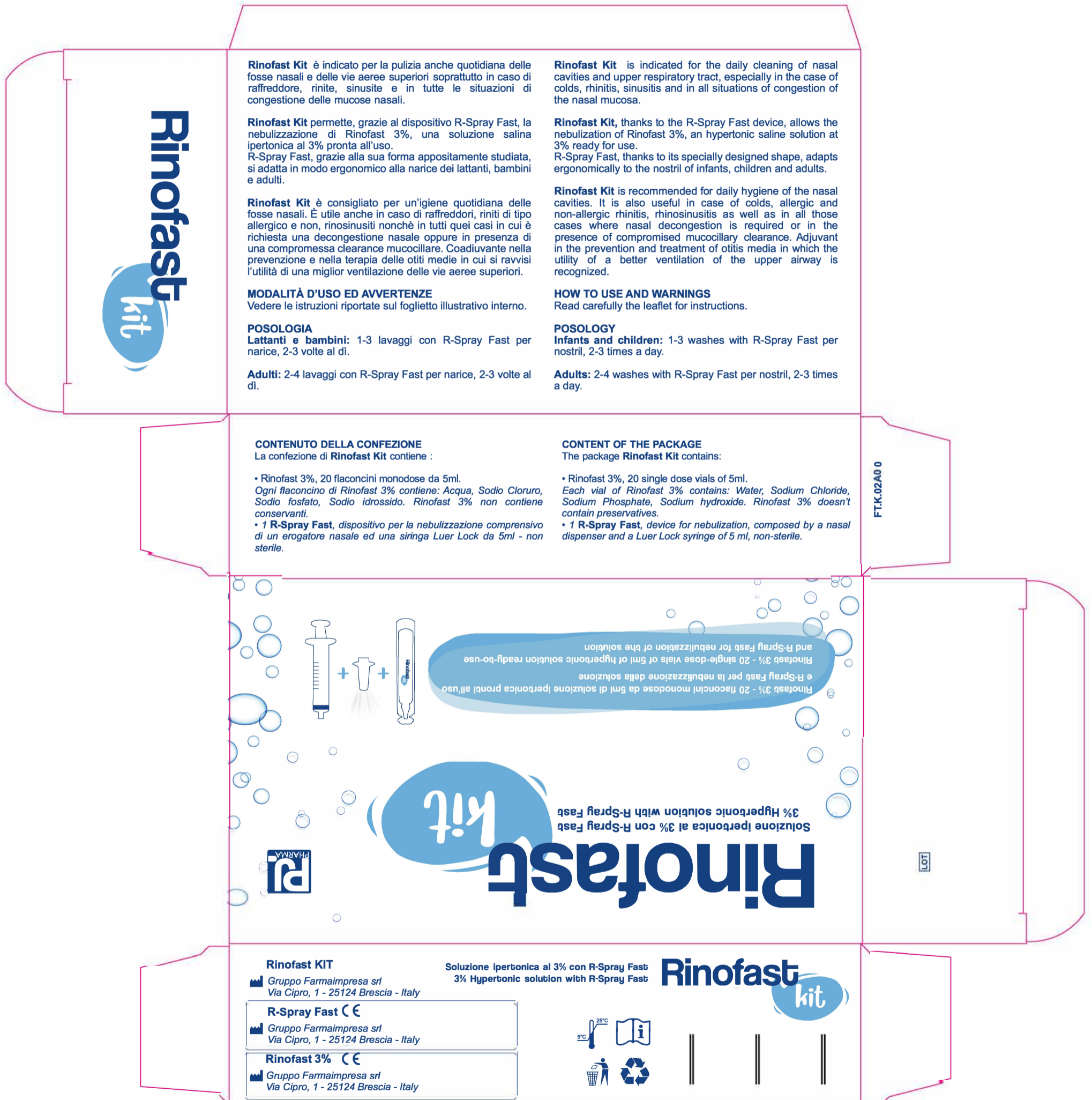

**Rinofast**  
kit

**Rinofast Kit** è indicato per la pulizia anche quotidiana delle fosse nasali e delle vie aeree superiori soprattutto in caso di raffreddore, rinite, sinusite e in tutte le situazioni di congestione delle mucose nasali.

**Rinofast Kit** permette, grazie al dispositivo R-Spray Fast, la nebulizzazione di Rinofast 3%, una soluzione salina ipertonica al 3% pronta all'uso.  
 R-Spray Fast, grazie alla sua forma appositamente studiata, si adatta in modo ergonomico alla narice dei lattanti, bambini e adulti.

**Rinofast Kit** è consigliato per un'igiene quotidiana delle fosse nasali. È utile anche in caso di raffreddori, riniti di tipo allergico e non, rinosinusiti nonché in tutti quei casi in cui è richiesta una decongestione nasale oppure in presenza di una compromessa clearance mucociliare. Coadiuvante nella prevenzione e nella terapia delle otiti medie in cui si ravvisa l'utilità di una miglior ventilazione delle vie aeree superiori.

**MODALITÀ D'USO ED AVVERTENZE**  
 Vedere le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo interno.

**POSOLOGIA**  
**Lattanti e bambini:** 1-3 lavaggi con R-Spray Fast per narice, 2-3 volte al dì.

**Adulti:** 2-4 lavaggi con R-Spray Fast per narice, 2-3 volte al dì.

**Rinofast Kit** is indicated for the daily cleaning of nasal cavities and upper respiratory tract, especially in the case of colds, rhinitis, sinusitis and in all situations of congestion of the nasal mucosa.

**Rinofast Kit**, thanks to the R-Spray Fast device, allows the nebulization of Rinofast 3%, an hypertonic saline solution at 3% ready for use.  
 R-Spray Fast, thanks to its specially designed shape, adapts ergonomically to the nostril of infants, children and adults.

**Rinofast Kit** is recommended for daily hygiene of the nasal cavities. It is also useful in case of colds, allergic and non-allergic rhinitis, rhinosinusitis as well as in all those cases where nasal decongestion is required or in the presence of compromised mucociliary clearance. Adjuvant in the prevention and treatment of otitis media in which the utility of a better ventilation of the upper airway is recognized.

**HOW TO USE AND WARNINGS**  
 Read carefully the leaflet for instructions.

**POSODOGY**  
**Infants and children:** 1-3 washes with R-Spray Fast per nostril, 2-3 times a day.

**Adults:** 2-4 washes with R-Spray Fast per nostril, 2-3 times a day.

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**  
 La confezione di **Rinofast Kit** contiene :

- Rinofast 3%, 20 flaconcini monodose da 5ml.

Ogni flaconcino di Rinofast 3% contiene: Acqua, Sodio Cloruro, Sodio fosfato, Sodio idrossido. Rinofast 3% non contiene conservanti.

- 1 **R-Spray Fast**, dispositivo per la nebulizzazione comprensivo di un erogatore nasale ed una siringa Luer Lock da 5ml - non sterile.

**CONTENT OF THE PACKAGE**  
 The package **Rinofast Kit** contains:

- Rinofast 3%, 20 single dose vials of 5ml.

Each vial of Rinofast 3% contains: Water, Sodium Chloride, Sodium Phosphate, Sodium hydroxide. Rinofast 3% doesn't contain preservatives.

- 1 **R-Spray Fast**, device for nebulization, composed by a nasal dispenser and a Luer Lock syringe of 5 ml, non-sterile.

FT.K.02A0 0

Rinofast kit

Soluzione ipertonica al 3% con R-Spray Fast  
 3% Hypertonic solution with R-Spray Fast

Rinofast 3% - 20 flaconcini monodose da 5ml di soluzione ipertonica pronta all'uso e R-Spray Fast per la nebulizzazione della soluzione  
 Rinofast 3% - 20 single-dose vials of 5ml of hypertonic solution ready-to-use and R-Spray Fast for nebulization of the solution

Ri PHARMA

**Rinofast KIT**  
 Gruppo Farma Impresa srl  
 Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy

**R-Spray Fast CE**  
 Gruppo Farma Impresa srl  
 Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy

**Rinofast 3% CE**  
 Gruppo Farma Impresa srl  
 Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy

**Rinofast**  
kit

25°C

i

♻️

LOT

Product: RINOFAST KIT  
 Internal code: FT.K.02  
 Country: -  
 Company: PJPHARMA  
 Operator:

Size flat/folded:  
 Paper:  
 Colors:

# Rinofast kit

Soluzione ipertonica al 3% con R-Spray Fast



**Rinofast Kit** è indicato per la pulizia anche quotidiana delle fosse nasali e delle vie aeree superiori soprattutto in caso di raffreddore, rinite, sinusite e in tutte le situazioni di congestione delle mucose nasali.

**Rinofast Kit** permette, grazie al dispositivo R-Spray Fast, la nebulizzazione di Rinofast 3%, una soluzione salina ipertonica al 3% pronta all'uso. R-Spray Fast grazie alla sua forma appositamente studiata, si adatta in modo ergonomico alla narice dei lattanti, bambini e adulti.

**Rinofast Kit** è consigliato per un'igiene quotidiana delle fosse nasali. È utile anche in caso di raffreddori, riniti di tipo allergico e non, rinosinuiti nonché in tutti quei casi in cui è richiesta una decongestione nasale oppure in presenza di una compromessa clearance mucociliare. Coadiuvante nella prevenzione e nella terapia delle otiti medie in cui si ravvisa l'utilità di una miglior ventilazione delle vie aeree superiori.

#### POSOLOGIA


**Lattanti e bambini:** 1-3 lavaggi con R-Spray Fast per narice, 2-3 volte al dì.

**Adulti:** 2-4 lavaggi con R-Spray Fast per narice, 2-3 volte al dì.

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione di Rinofast Kit contiene:

- Rinofast 3%, 20 flaconcini monodose da 5ml. (fig.1) Ogni flaconcino di Rinofast 3% contiene: Acqua, Sodio Cloruro, Sodio fosfato, Sodio idrossido. Rinofast 3% non contiene conservanti.
- **1 R-Spray Fast**, dispositivo per la nebulizzazione comprensivo di un erogatore nasale ed una siringa Luer Lock da 5ml - non sterile. (fig. 2)

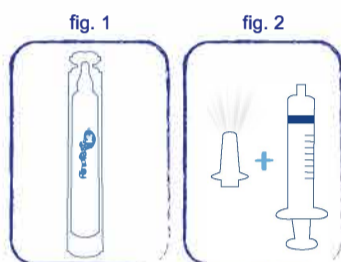

#### MODALITÀ D'USO

- Staccare un flaconcino monodose ed aprirlo piegando la punta lungo la linea di pretaglio.
- Inserire la punta della siringa nella bocca del flaconcino, quindi aspirare la soluzione da nebulizzare. (fig. 3)

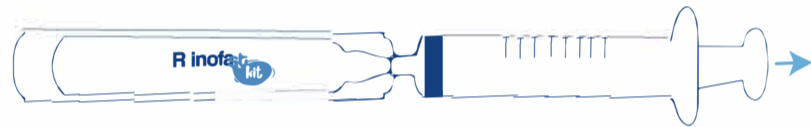


fig. 3

- Assemblare R-Spray Fast fissando la siringa, riempita con la soluzione di Rinofast 3% da nebulizzare, all'erogatore. (fig. 4)

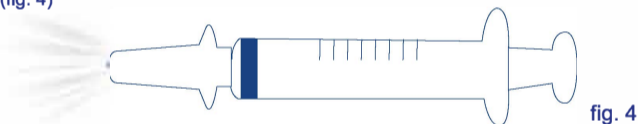


fig. 4

- Rimuovere il cappuccio dell'erogatore di R-Spray Fast.
- Nei lattanti e bambini (sotto i 3 anni e comunque in funzione del livello di collaborazione) è necessario effettuare i lavaggi in posizione sdraiata su un fianco, tenendo la testa reclinata da un lato e inserendo delicatamente l'erogatore di R-Spray Fast nella narice superiore. Spingere energicamente sul pistone della siringa per nebulizzare la soluzione. Nei bambini più grandi e negli adulti inserire l'erogatore di R-Spray Fast in una narice, mantenendo il busto in posizione eretta e senza reclinare il capo. Inspirare e in contemporanea spingere energicamente sul pistone della siringa per nebulizzare la soluzione. Lasciare il pistone della siringa prima di espirare.
- Ripetete le operazioni del punto precedente anche per l'altra narice, cercando di suddividere equamente la soluzione contenuta nella siringa tra le due narici.
- Prima di riporre il Kit sciacquare R-Spray Fast sotto l'acqua corrente.

#### AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

- La soluzione non è iniettabile.
- Impiegare il prodotto esclusivamente per l'uso a cui è destinato.
- Nei bambini sotto l'anno d'età e in caso di terapia farmacologica concomitante utilizzare dietro consiglio medico.
- In caso di reazioni avverse sospendere l'utilizzo del prodotto e contattare il medico.
- Non usare in caso di nota incompatibilità o allergia verso qualsiasi componente della preparazione.
- In caso di utilizzo della soluzione per aerosol, si raccomanda di seguire le indicazioni dell'apparecchio.
- Il prodotto deve essere conservato al riparo dalla luce e da fonti di calore.
- Non utilizzare in caso di contenitore danneggiato.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il dispositivo R-Spray Fast non sia danneggiato; se risultasse danneggiato, non utilizzarlo per effettuare la nebulizzazione.
- R-Spray Fast è destinato ad un solo paziente, ma può essere riutilizzato per più nebulizzazioni. Per il riutilizzo, effettuare la pulizia di R-Spray Fast.
- R-Spray Fast può essere utilizzato per non più di 100 erogazioni e comunque non più di 6 mesi.
- L'uso di R-Spray Fast da parte di bambini o di persone non autosufficienti, deve avvenire sotto la supervisione di un adulto che abbia letto le presenti istruzioni d'uso.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

#### Rinofast KIT

Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1= 25124 Brescia= Italy

#### R-Spray Fast

Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1= 25124 Brescia= Italy

#### Rinofast 3%

Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1= 25124 Brescia= Italy



Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

FT.K.02.F00 rev. del 27/09/2019

# Rinofast kit

3% Hypertonic solution with R-Spray Fast



**Rinofast Kit** is indicated for the daily cleaning of nasal cavities and upper respiratory tract, especially in the case of colds, rhinitis, sinusitis and in all situations of congestion of the nasal mucosa.

**Rinofast Kit**, thanks to the R-Spray Fast device, allows the nebulization of Rinofast 3%, hypertonic saline solution at 3% ready for use. R-Spray Fast thanks to its specially designed shape, adapts ergonomically to the nostril of infants, children and adults.

**Rinofast Kit** is recommended for daily hygiene of the nasal cavities. It is also useful in case of colds, allergic and non-allergic rhinitis, rhinosinusitis as well as in all those cases where nasal decongestion is required or in the presence of compromised mucociliary clearance. It is adjuvant in the prevention and treatment of otitis media in which the utility of a better ventilation of the upper airway is recognized.

#### POSODOLOGY


**Infants and children:** 1-3 washes with R-Spray Fast per nostril, 2-3 times a day.

**Adults:** 2-4 washes with R-Spray Fast per nostril, 2-3 times a day.

#### CONTENT OF THE PACKAGE

The package of Rinofast Kit contains:

- Rinofast 3%, 20 single dose vials of 5ml. (fig.1) Each vial of Rinofast 3% contains: Water, Sodium Chloride, Sodium Phosphate, Sodium hydroxide. Rinofast 3% doesn't contain preservatives.
- **1 R-Spray Fast**, device for nebulization, composed by nasal dispenser and a Luer Lock syringe of 5 ml, non-sterile. (fig.2)

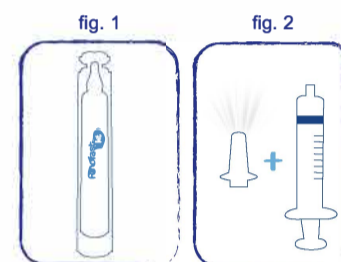

#### HOW TO USE

- Remove a single-dose vial and open it by folding the tip along the pre-cut line.
- Insert the tip of the syringe in the mouth of the vial, then draw the solution to be sprayed into the syringe. (fig.3)

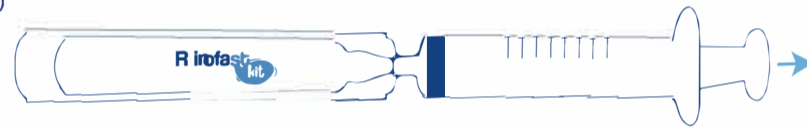


fig. 3

- Assemble R-Spray Fast attaching the syringe, filled with Rinofast 3% to be sprayed, to the dispenser. (fig. 4)

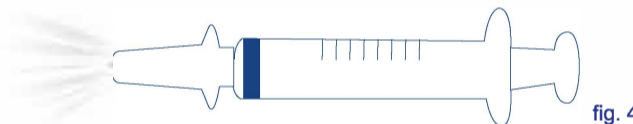


fig. 4

- Remove the cap from the dispenser of R-Spray Fast.
- In infants and children (under 3 years of age), it is necessary to perform the washes lying on your side, keep the head tilted on the other side and gently insert the dispenser of R-Spray Fast into the upper nasal nostril. Energetically press the syringe plunger to spray the solution.
- In infants and adults insert R-Spray Fast in one nasal nostril, staying fully upright and without tilting the head. Draw the solution and simultaneously press the syringe plunger to spray the solution. Leave the syringe plunger before to breathe out.
- Repeat the latter operation also for the other nasal nostril, taking care to equally divide the solution for both nasal nostrils.
- Before replacing the kit into the package, rinse R-Spray Fast.

#### WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE

- The solution is not injectable.
- Use the product exclusively for the use for which it is intended.
- In children under one years of age and in case of concomitant pharmacological therapy, for the use of the product consult a doctor.
- In case of adverse reactions, stop the treatment and consult a doctor.
- Do not use in case of known hypersensitivity to one or more components of the product.
- If the solution is used for aerosol, it is recommended to follow instructions of the aerosol device.
- Store the product away from light and heat sources.
- Do not use it if the package is damaged.
- Do not use it after the expiry date.
- The expiry date refers to the product properly packaged and correctly stored.
- Before use, check that the R-Spray Fast device is not damaged; if it is damaged, do not use it to spray the solution.
- R-Spray Fast is intended for 1 patient, but it can be used for more nebulizations. For the re-use, clean R-Spray Fast.
- R-Spray Fast can be used for no more than 100 sprays and anyway no more than 6 months.
- The use of R-Spray Fast by children and non-self-sufficient people must take place under the supervision of an adult who has read these instructions.
- Keep out of reach and sight of children.

#### Rinofast KIT


Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1= 25124 Brescia= Italy

#### R-Spray Fast

Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1= 25124 Brescia= Italy

#### Rinofast 3%

Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1= 25124 Brescia= Italy

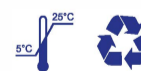

The medical device must not be disposed in the wastewaters or household waste. Ask your pharmacist how to dispose the medical devices no longer required. This will help protect the environment.

FT.K.02.F00 rev. on 27/09/2019