


Product: **TALAVEA OVULES**
 Internal code: **FT.CE.141**
 Country: --
 Company:
 Operator:

Folded size:
 Paper:
 Colors:
 Finishing:

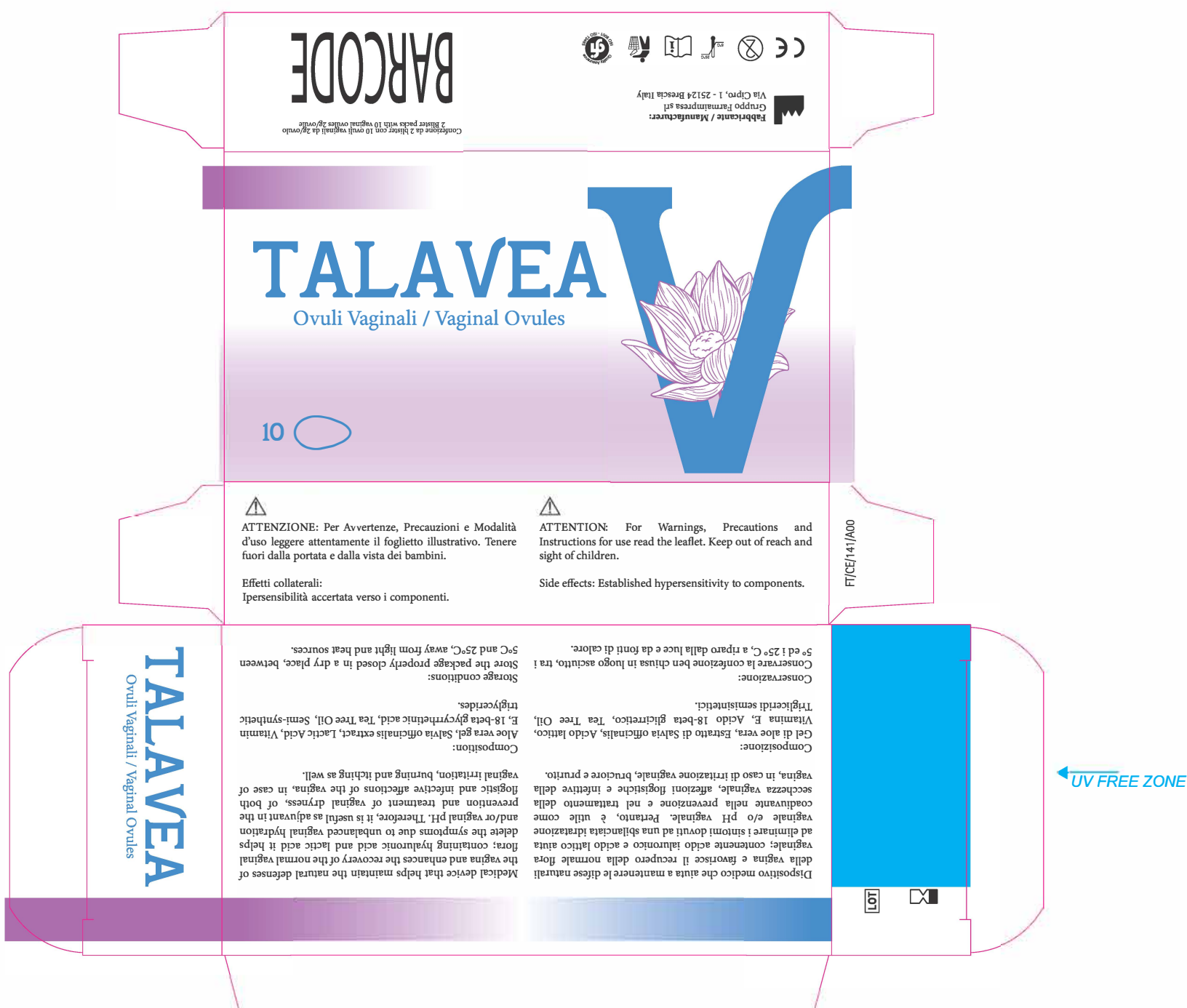

UV FREE ZONE

Product: TALAVEA OVULES
Internal code: FT.CE.141
Country: --
Company:
Operator:

Size flat/folded:
Paper:
Colors:

TALAVEA

Vaginal Ovules

Indications:

Talavea vaginal ovules is a medical device that helps maintain the natural defenses of the vagina and enhances the recovery of the normal vaginal flora; containing hyaluronic acid and lactic acid it helps delete the symptoms due to unbalanced vaginal hydration and/or vaginal pH. Therefore, it is useful as adjuvant in the prevention and treatment of vaginal dryness, of both flogistic and infective affections of the vagina, in case of vaginal irritation, burning and itching as well.

Dosage:

Insert 1 ovule/day in the vagina – preferably in the evening before sleeping - for 5-7 days after the end of menstrual cycle or according medical prescriptions.

Method of Use:

1. Wash vaginal area properly (preferably with both a vaginal wash external and internal);
2. Open the package and after having washed properly your hands, take one ovule from the blister;
3. Gently insert the ovule deep into the vagina, preferably in supine position, avoiding accidental exit of the ovule out of the vagina;

Composition:

Aloe vera gel, Salvia officinalis extract, Lactic Acid, Vitamin E, 18-beta glycyrrhetic acid, Tea Tree Oil, Semi-synthetic triglycerides.

Storage Conditions:

Store the package properly closed in a dry place, between 5°C and 25°C, away from light and heat sources.

Side effects:

Known hypersensitivity to any of the ingredients.

Warnings:

Keep out of reach and sight of children. Do not swallow. Do not use if package has been previously opened or damaged. Do not use the product after the expiry date. The expiry date refers to the unopened and properly stored product. Do not use the product in case of vaginal lesions and wounds. Do not use the product during menstruation. Do not exceed the suggested dosage without medical

advice. The use - especially if prolonge - can lead to sensitiveness events. If this is the case, stop the treatment and consult the doctor in order to start a proper therapy. It is important to inform the doctor or the pharmacist of any undesired effects not reported in the insert leaflet. Do not use the product for more than 30 consecutive days.

Precautions on use:


During pregnancy, lactation and for children the use of ovules must be limited only if strictly required and under direct control of your doctor. In case of the intact hymen, before using consult your gynecologist to the specific conditions of use. Monouse device. In case of accidental exit of the ovule out of the vagina, do not re-use the ovule.

Presentation:

Folding box with two blisters containing 10 vaginal ovules of 2g/ovule.



Fabbricante:
 Gruppo Farmaimpresa srl
 Via Cipro, 1 - 25124 Brescia Italy

 Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

FT/CE/141/F00 Rev. 23/04/2021

TALAVEA

Ovuli Vaginali

Indicazioni:

Talavea ovuli vaginali è un che aiuta a mantenere le difese naturali della vagina e favorisce il recupero della normale flora vaginale; contenente acido ialuronico e acido lattico aiuta ad eliminare i sintomi dovuti ad una sbilanciata idratazione vaginale e/o pH vaginale. Pertanto, è utile come coadiuvante nella prevenzione e nel trattamento della secchezza vaginale, affezioni flogistiche e infettive della vagina, in caso di irritazione vaginale, bruciore e prurito.

Posologia:

Introdurre 1 ovulo al giorno in vagina preferibilmente alla sera prima di coricarsi per 5-7 giorni successivi alla fine del ciclo mestruale o secondo indicazione medica.

Modalità d'uso:

1. Lavare le parti intime accuratamente (preferibilmente sia con una lavanda vaginale esterna che con una interna)
2. Aprire la confezione e, dopo essersi ben lavate le mani, prelevare dal blister un singolo ovulo;
3. Inserire l'ovulo delicatamente in vagina cercando di arrivare in profondità, preferibilmente in posizione supina, evitando fuoriuscite accidentali dell'ovulo dalla vagina.

Composizione:

Gel di aloe vera, Estratto di Salvia officinalis, Acido lattico, Vitamina E, Acido 18-beta glicirretico, Tea Tree Oil, Trigliceridi semisintetici.

Conservazione:

Conservare la confezione ben chiusa in luogo asciutto, tra i 5° ed i 25° C, a riparo dalla luce e da fonti di calore.

Effetti collaterali:

Ipersensibilità accertata verso i componenti.

Avvertenze:

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione è stata precedentemente aperta o danneggiata. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni o ferite

vaginali. Non utilizzare in presenza di mestruazioni. Non superare la dose consigliata senza il parere del medico. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifici, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo. Non utilizzare il prodotto per più di 30 giorni consecutivi.

Precauzioni d'uso:


Nelle donne in gravidanza ed in allattamento e nei bambini l'uso degli ovuli deve essere limitato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In caso di imene intatto, prima dell'utilizzo consultare il proprio ginecologo sulle specifiche modalità d'uso. Dispositivo monouso. Non riutilizzare in caso di fuoriuscite accidentali.

Presentazione:

Confezione da 2 blister contenente 10 ovuli vaginali da 2g/ovulo.



Manufacturer:
 Gruppo Farmaimpresa srl
 Via Cipro, 1 - 25124 Brescia Italy

 The medical device must not be disposed in the wastewaters or household waste. Ask your pharmacist how to dispose the medical devices no longer required. This will help protect the environment.